

ふーっ——と楽しく長息トレーニング

医療用

長息生活[®]

嚥下機能

口腔機能

口腔関連筋

10本入



レベル0



レベル1



レベル2



レベル3

3本入



レベル0



レベル1



レベル2



レベル3



トライアルセット
レベル0、1、2 各1本

レベルMAX

1本入



製品形状



レベル0



レベル3

医療用

長息生活[®]

販売名：医療用長息生活

届出番号：13B1X00209000015

一般的名称：口腔・嚥下機能訓練器具
一般医療機器

商品名	商品コード	伸展圧	入数
医療用長息生活 レベル0	PNS0003	24cmH ₂ O	3本
医療用長息生活 レベル1	PNS0103	28cmH ₂ O	3本
医療用長息生活 レベル2	PNS0203	45cmH ₂ O	3本
医療用長息生活 レベル3	PNS0303	54cmH ₂ O	3本
医療用長息生活 トライアルセット	PNSTR03	レベル0・1・2	各1本

商品名	商品コード	伸展圧	入数
医療用長息生活 レベル0	PNS0010	24cmH ₂ O	10本
医療用長息生活 レベル1	PNS0110	28cmH ₂ O	10本
医療用長息生活 レベル2	PNS0210	45cmH ₂ O	10本
医療用長息生活 レベル3	PNS0310	54cmH ₂ O	10本
医療用長息生活 レベルMAX	PNSMX01	65cmH ₂ O	1本

【使用目的又は効果】

医師等の指導の下、口腔・嚥下の機能の低下に対するリハビリテーションに使用する。

【使用方法】


1日3セット。1セットにつき20回程度の伸展を目安にお使いください。ご使用される方の状況により適宜増減してください。
適切な方法で使用した場合、1本の耐用期間は使用開始後10日間を目安として廃棄してください。

トレーニングの方法



1

背筋を伸ばして鼻からゆっくり
深く息を吸い込みます

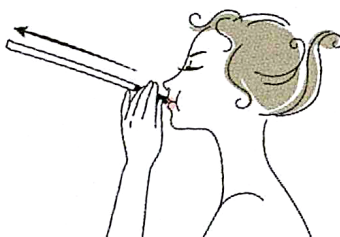

2

本品をくわえ、伸展部の先端が
伸び切るまで吹き伸ばします



3

伸展部の先端が巻き戻らないように
息を5秒～10秒程度吹き続けます

【使用上の注意】 ●ご使用前に、同封の添付文書を必ずお読みください。 ●本品を口腔・嚥下機能のリハビリテーションの目的以外に使用しないでください。 ●重篤な既往歴（心筋梗塞、脳梗塞）、肺の疾患（気胸、肺気腫）のある方は使用しないでください。 ●本品の伸展部の先端に触れないでください。また本品の分解、改造等を行わないでください。内蔵されている針金でケガをする恐れがあります。 ●一度使用した本品は個人の使用に限り、複数の人が使わないでください。 ●使用中、吹き口部に汚れた手や机、他の物に接触させないように、常に清潔にしてください。 ●使用中、痛み、息苦しさ、めまい、吐き気など身体に異常を感じたら速やかに使用を中止し、医師等に相談してください。 ●呼吸器疾患、循環器疾患がある方が使用する場合は、疾患を医師に伝えたくて相談してください。

【保管方法】 ●高温・高湿・水濡れや直射日光は絶対に避け、室温で保管してください。 ●開封後は、塵やほこりのない清潔な場所や容器、袋などで保管してください。 ●玩具と間違えて本品で遊ばないように、子供の手の届かない場所に保管してください。

●代理店

●製造販売元

Akiyama 株式会社 秋山製作所

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-4 秋山ビル

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-4 秋山ビル
TEL03-3811-0804(代) FAX03-3812-8857大阪営業所 〒540-0034 大阪市中央区島町2-1-10 ヤハギ天満橋ビル2F
TEL06-6920-0802(代) FAX06-6920-0822

●製造元

株式会社ルピナス TEL0824-62-0384